



TWIN ONRUSTHEKKEN

unieke punten

Veiligheid

01. 4 SECTIES

Veiligheid boven alles

Dankzij de 4 secties zijn er kleinere openingen tussen de latten. Dit vermindert het klemgevaar aanzienlijk.

02. 12 CM VRIJE HOOGTE

Geen klemgevaar

De 4 secties zorgen ervoor dat het onrusthekken heel hoog kan, maar tegelijkertijd heel compact is en daardoor voldoende afstand houdt van de grond zoals beschreven in de norm EN 60601-2-52.

03. KLEMBEVEILIGING

Bediening zonder zorgen

Bij het inschuiven van de Twin onrusthekken stoppen deze op 2,5 cm hoogte. Op deze manier worden vingers niet geklemd bij het neerlaten van de onrusthekken.

04. PANEEL SCHUIFT MEE

Veilig én ergonomisch

Het onderste paneel van het onrusthekken schuift mee omhoog. Dit vermindert het klemrisico en reduceert de opening tussen de secties. De opening wordt ingevuld door het paneel.



Ergonomie

01. REMPEDAAL

Bereikbaar in alle posities


Het is mogelijk om het paneel van het Twin onrusthekken omhoog te schuiven zonder de onrusthekkens uit te schuiven. Ook in de laagste positie blijft het rempedaal daardoor bereikbaar.



02. OPSTAHULP

Geen klemgevaar

In de middelhoge positie kunnen de onrusthekkens dienen als opstahulp. De bovenste lat biedt de nodige ondersteuning aan de bewoner.

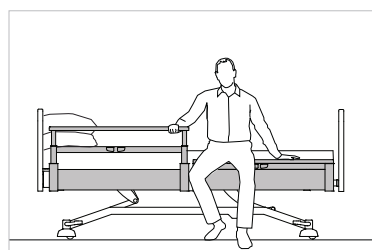

03. BOVENLAT

Betere grip


De ergonomisch gevormde bovenlat in hout of aluminium zorgt voor een goede grip en steun. De hand kan volledig rondom de bovenlat, wat voor de nodige houvast zorgt bij het opstaan of bij het wandelen rond het bed.



04. ERGONOMISCHE ZORG

Veilig én ergonomisch

Het Twin paneel kan apart omhoog schuiven, zonder dat de onrusthekkens meeschuiven. In hogere bed positie, kan verplegend personeel benen en knieën dieper onder het bed plaatsen.

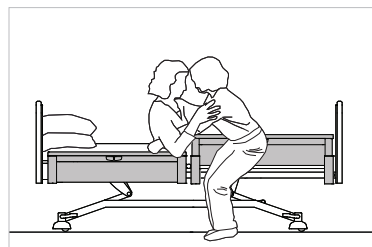

Bediening en design

01. INGEBOUWDE VEILIGHEID

Bediening zonder risico

Om de manipulatie van de onrusthekkens te activeren, moet de bovenste lat eerst worden opgetild. Deze vergrendeling voorkomt het onbedoeld neerhalen van het onrusthekken.



02. VISUELE CHECK

In één oogopslag

Wanneer de groene pinnetjes zichtbaar zijn, zijn de onrusthekkens vergrendeld en in de hoogste positie.



03. COMPACT

Esthetische waarde

De Twin onrusthekkens zijn zeer compact in laagste positie (slechts 7,2 cm boven het ligvlak) en vormen een afgewerkt geheel met het bed. Het uitstappen uit het bed is comfortabel en obstakelvrij.



Posities

01. LAAGSTE POSITIE

Esthetische positie

Hoogte van 7,5 cm (vanaf het ligvlak). In deze laagste positie zijn de secties van het onrusthekken niet zichtbaar. Het uitstappen uit het bed is comfortabel en obstakelvrij (geen compressie ter hoogte van de benen).



02. HANDGREEPPPOSITIE

Zich veilig voelen

Deze positie laat toe om de onrusthekken als handgreep te gebruiken. Dit zorgt voor een veilig gevoel wanneer u in het bed ligt.



03. MOBILITEITSBEVORDERENDE POSITIE (2 SECTIES)

Opstahulp

Hoogte van 30 cm (vanaf het ligvlak). In deze middelhoge positie kunnen de onrusthekken dienen als opstahulp. De bovenste lat biedt de nodige ondersteuning aan de bewoner.



04. HOOGSTE POSITIE (3 SECTIES)

Optimale protectie

Hoogte van 41 cm (vanaf het ligvlak). Deze hoge positie beschermt en beveiligd de bewoner optimaal in zijn bed. Deze hoogte maakt het gebruik van anti-decubitus matrassen met een dikte tot 19 cm mogelijk.

