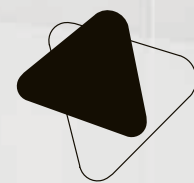





WELL Communications




Siena & Aris Hospital

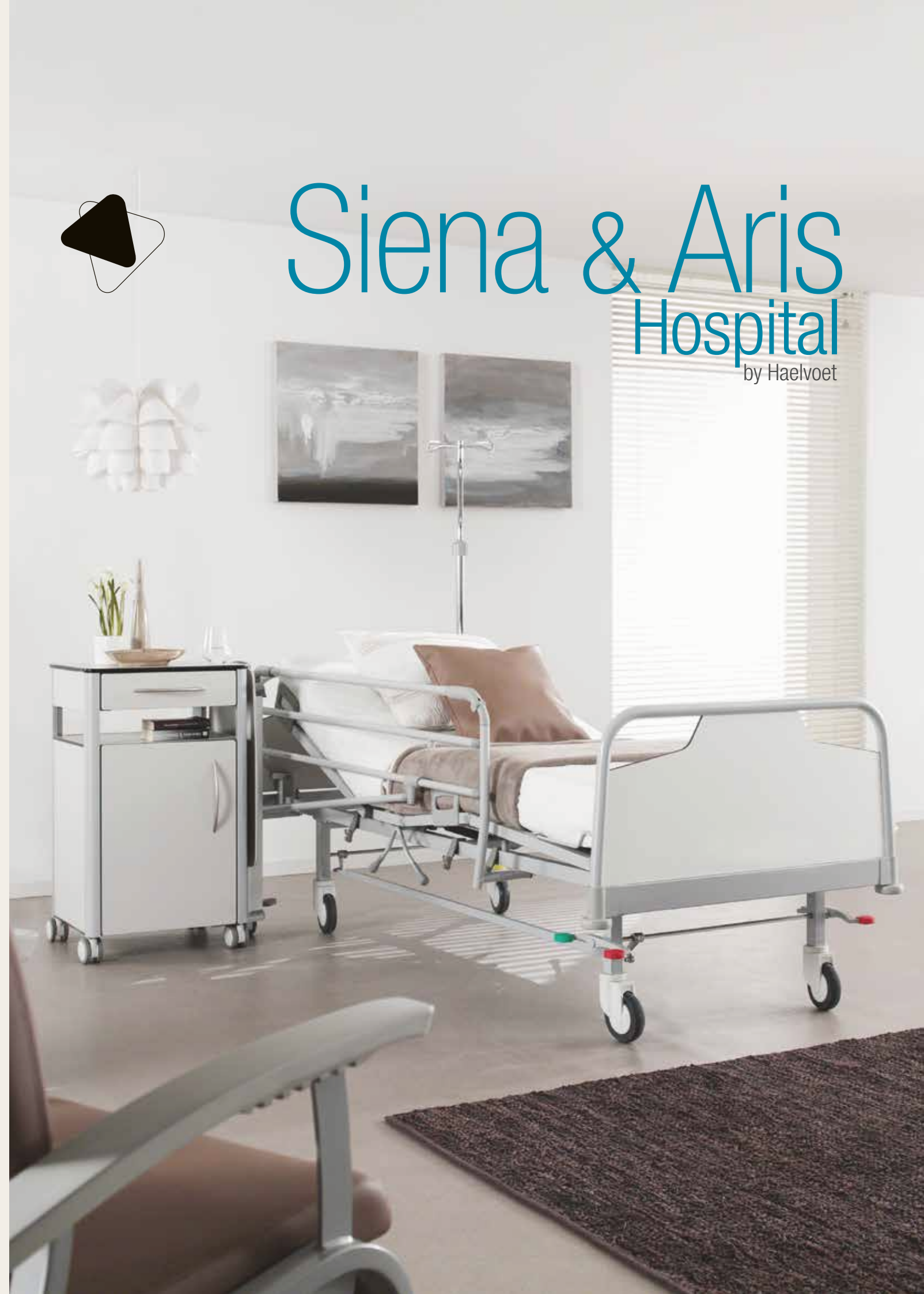by Haelvoet



HAELVOET NV **BELGIUM**
L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER
T +32 (0) 51 48 66 95
INFO@HAELVOET.BE WWW.HAEVOET.BE

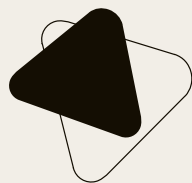ZIEKENHUISMEUBILAIR - MEUBILAIR VOOR WOON- EN ZORGCENTRA



Siena

Het Siena ziekenhuisbed is een gebruiksvriendelijk bed met een uiterst functioneel en doeltreffend ligvlak.



Haelvoet nv
Uitgave 2013
Haelvoet behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen.
Geringe kleurafwijkingen zijn mogelijk.

001	Onrusthekkens (*) • Veiligheid kent geen prijs
	De Atmosphère onrusthekkens beschermen de patiënt over 2/3 van de lengte van het bed. Indien een bescherming over de volledige lengte gewenst is, kan men kiezen voor de telescopisch verlengbare Trix onrusthekkens.
002	Ligvlak • Comfortabel liggen
	Naar keuze worden er 2 verschillende ligvlaktypes aangeboden. Standaard is het ligvlak uitgerust met goed ventilerende metalen ligvlakprofielen. De optionele volkunststof ligvlakdelen (*) zijn uitneembaar en gemakkelijk in onderhoud.
003	Bedpanelen • Een harmonieus geheel
	Keuze uit 4 verschillende bedpanelen, Vela, Lauro (*), Jaro (*) en het houten bedpaneel Senzo (*). Hoofd- en voetpaneel zijn bij alle types zonder gereedschap eenvoudig uitneembaar.
004	Matrashouders • Doelgericht aanwezig
	De matrashouders verhinderen een zijdelingse verschuiving van de matras. Deze dienen eveneens als handvat om de rug- en kniesteun manueel te verstellen.
005	Hulzen • Optimale verzorging
	Twee hulzen aan hoofd- en voeteneinde voor serumhouder, bedgalg of accessoires zorgen ervoor dat het bed optimaal en naar wens uitgerust kan worden.
006	Bedieningshendel • Centraal en binnen handbereik
	De bedieningshendel activeert een gasveer teneinde het gewenste ligvlakdeel te kunnen verstellen. Optioneel kunnen de rug- en knieverstelling elektrisch geactiveerd worden. Hierbij bestaat ook de mogelijkheid om de elektrische functies met één knop uit te schakelen d.m.v. een vergrendeldoos (*).
007	Accessoirehouders • Hoge functionaliteit
	Aan beide zijden zorgen 3 multifunctionele houders voor het snel en gemakkelijk aanbrengen van accessoires.
008	Bedverlenging • Verhoogde flexibiliteit
	De geïntegreerde bedverlenging laat standaard toe om het bed met 20 cm te verlengen. Een optionele voetensteunverlenging (*) garandeert een volledige functionaliteit van het ligvlak.
009	Wielen (*) • Grote wendbaarheid
	Een ruime waaier aan hoogwaardige designwielen garandeert een uiterst mobiel en wendbaar bed.
010	Centrale rem (*) • Activatie in één beweging
	Centraal geremde wielen, met een goed bereikbare pedaal, vergemakkelijken het gebruik van het Siena bed voor het verzorgend personeel.

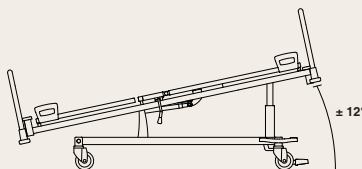
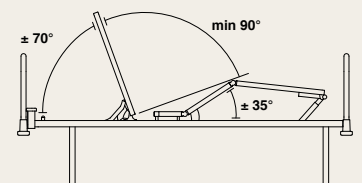
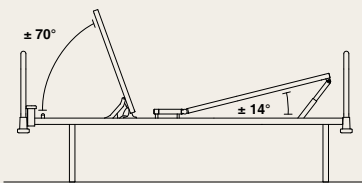
* optie bij Siena Hospital

Comfort voor ieder

Het comfort van een eenvoudige bediening en een efficiënt gebruik van het bed ondersteunen het verplegend personeel bij hun dagtaak.

• Bedieningen

De bedieningshendel is gebruiksvriendelijk en gemakkelijk bereikbaar aan beide zijden van het bed.



Zit- of relaxpositie

Het drie- of vierdelige (*) ligvlak biedt veelvoudige verstelmogelijkheden en beschikt over een zeer toegankelijke bediening aan beide zijden van het bed. Op deze manier kan gemakkelijk de gewenste zitpositie - of bij een vierdelig ligvlak een relaxpositie (*) - verkregen worden. De rug- en beenverstelling kan optioneel elektrisch worden geactiveerd d.m.v. een handbediening (*).

Trendelenburgpositie

De Trendelenburgpositie (*) kan uitgevoerd worden via het rode voetpedaal aan het voeteneinde van het bed. Wanneer het pedaal wordt ingedrukt, inclineert het bed in een zacht vloeiende beweging tot de gewenste positie.

• Virtueel draaipunt

Een virtueel draaipunt verhoogt aanzienlijk het ligcomfort voor de patiënt. Bij het inclineren van de rugsteun verschuift deze rugsteun automatisch mee naar het hoofdeinde. Hierdoor ontstaat er een drukontlasting van de bekkenzone en wordt het decubitusrisico gereduceerd.



001



002



003



004

• Hoog/laag onderwagen

De hoog/laag onderwagen Vico (*) kan eenvoudig onder het bed worden geplaatst om zo een volwaardig hoog/laag bed te verkrijgen. In combinatie met de verwijderbare kunststof afdekkap (*) zijn de moeilijk bereikbare oppervlakken gemakkelijk te reinigen.

Gebruiksvriendelijk

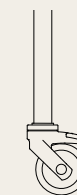
Bij het ontwerp van het Siena verpleegbed werd ruime aandacht besteed aan efficiëntie in de verzorging.

• Wielen - Hogere mobiliteit


Het dagelijkse gebruik van het Siena bed wordt vereenvoudigd dankzij een gemakkelijk verplaatsbaar en wendbaar bed. Er is een ruime keuze aan wielen (Ø 100 mm of Ø 125 mm) al dan niet centraal geremd (*).



standaard op vaste
poten of in hoogte
verstelbare (*) poten



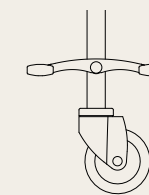wielen Ø 100 mm
individueel geremd en
optioneel in de hoogte
verstelbaar (*)



wielen Ø 125 mm centraal
geremd met richtingswiel (*)
Dit richtingswiel vergemakkelijkt
het besturen van het bed bij
een rechtlijnig traject.



005

• Bedverlenging - Flexibiliteit

Een ziekenhuisbed moet aan ieders wensen kunnen voldoen, onafhankelijk van de grootte van de patiënt. De geïntegreerde bedverlenging laat toe om het bed met 20 cm te verlengen. Een optionele voetensteunverlenging (*) garandeert een volledige functionaliteit van het ligvlak.

• Mechanisch - Hoge inzetbaarheid

Het Siena Hospital bed is volledig mechanisch, wat ervoor zorgt dat dit bed overal vlot inzetbaar is. Optioneel is een elektrische uitvoering mogelijk.

Veiligheid troef

Onze verschillende onrusthekkens bieden de patiënt een optimale veiligheid in elke positie. Elk type heeft zijn specifieke voordelen voor gebruiker en patiënt.



De Atmosphere onrusthekkens (*) bestaan uit één geheel en zijn neerklapbaar met een eenvoudig vergrendelsysteem.



De Trix onrusthekkens (*) bieden met hun 3 latten veiligheid over de volledige lengte van het bed. Een geïntegreerd telescopisch systeem zorgt ervoor dat de Trix onrusthekkens, ook wanneer het bed wordt verlengd, de zijkant van het bed over de volle lengte afsluiten.

001 Het Siena Hospital bed met wielen (*).

002 De bedieningshendel.

003 Het Trendelenburgpedaal (*).

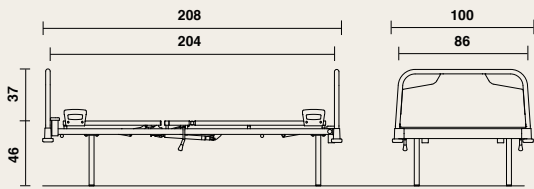
004 Het virtueel draaipunt van de rugsteun.

005 Verlengd Siena Hospital bed met telescopische Trix onrusthekkens (*).

* optie bij Siena Hospital

Siena Hospital Samenvatting

Afmetingen en prestaties (bij standaard bed)



- lengte: 208 cm, breedte: 100 cm (*);
- hoogte ligvlak: ± 46 cm, optioneel verstelbaar tot ± 55 cm (in 3 standen);
- veilig gewicht: 180 kg;
- gewicht (excl. uitbreidingen): 65 kg;
- ligvlakmaat: 204 x 86 cm;
- matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 16 cm (**).

* breedte (met Jaro panelen): 102 cm
** matrasdikte is afhankelijk van type onrusthekken

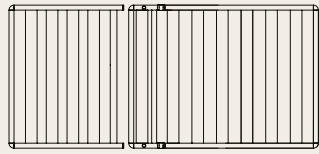
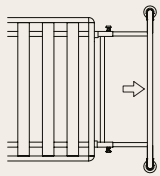
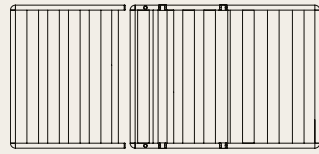
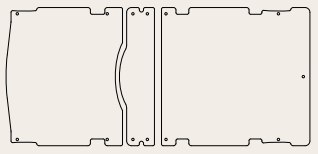
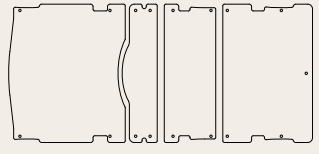
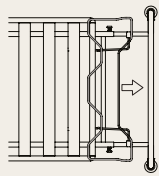
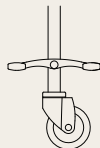
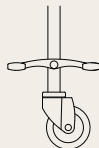
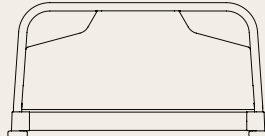
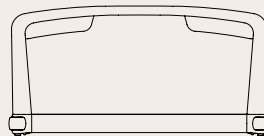
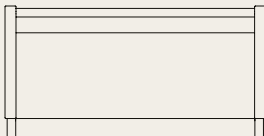
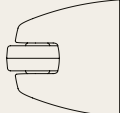
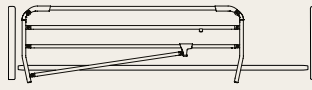
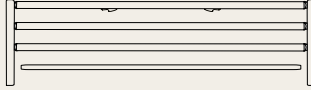
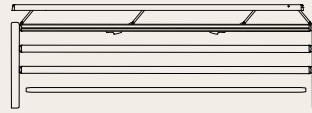
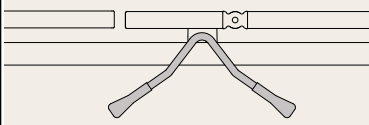
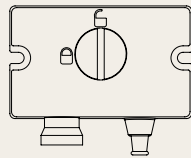
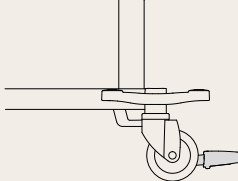
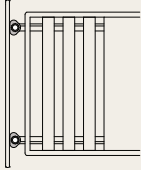
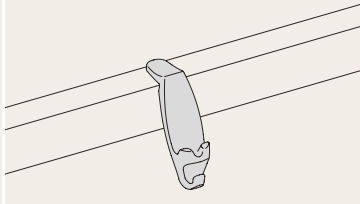
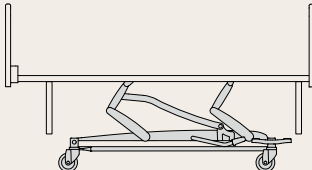
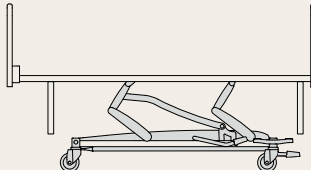


Een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding gaat bij Haelvoet niet ten koste van het milieu, want Haelvoet draagt duurzaamheid – in beide betekenissen van het woord – hoog in het vaandel. Al onze producten hebben een lange levensduur en worden geleverd met 10 jaar garantie op constructiefouten.



Het Siena ziekenhuisbed wordt vervaardigd volgens ISO 9001:2015 en ISO 13485:2016 en is in overeenstemming met de Europese Medische Hulpmiddelen Verordening EU 2017/745 en alle van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen:

- EN 60601-1 Medische elektrische toestellen - Deel 1: Algemene eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties.
- EN 60601-1-2 Medische elektrische toestellen – Deel 1-2: Algemene eisen voor de veiligheid en essentiële prestaties – Secundaire norm: Elektromagnetische compatibiliteit – Eisen en beproevingen.
- EN 60601-2-52 Medische elektrische toestellen - Deel 2-52: Bijzondere eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties van medische bedden.
- EN ISO 14971 Toepassing van risicomanagement op medische hulpmiddelen.

	Standaard Siena		Opties Siena				
LIGVLAK	 • 3-delig stalen ligvlak	 • Telescopische bedverlenging tot 20 cm	 • 4-delig stalen ligvlak	 • 3-delig ligvlak met uitneembare volkunststof platen	 • 4-delig ligvlak met uitneembare volkunststof platen	 • Voetensteunverlenging tot 20 cm	
WIELEN	 • Poten vaste hoogte		 • Verstelbare poten in 3 standen	 • Niet-verstelbare poten, wielen ø 100 mm, individueel geremd	 • Verstelbare poten, wielen ø 100 mm, individueel geremd	 • Niet-verstelbare poten, wielen ø 125 mm, centraal geremd	 • Niet-verstelbare poten, wielen ø 125 mm, richtingswiel, centraal geremd
PANEELTYPE	 • Vela paneel		 • Lauro paneel	 • Jaro paneel	 • Senzo paneel	 • Muurafstandhouder	
ONRUSTHEKKENS			 • Atmosphere onrusthekken	 • Trix onrusthekken (enkel in combinatie met Jaro paneel)	 • Trix onrusthekken met 4de lat (enkel in combinatie met Jaro paneel)		
BEDIENING	 • Bedieningshendel		 • Elektrische handbediening	 • Vergrendeldoos (ACL)	 • Trendelenburg pedaal (vaste hoogte)		
EXTRA'S	 • 4 bevestigingshulzen (hoofdeinde & voeteneinde)	 • 6 kunststof accessoirehaakjes	 • Hoog/laag onderwagen Vico	 • Hoog/laag onderwagen Vico met Trendelenburg pedaal			



Aris

Het Aris ziekenhuisbed is een efficiënt en comfortabel metalen bed. De optionele inclineerbare rugsteun laat zich eenvoudig aan beide bedzijden bedienen.

001	Onrusthekkens (*) • Veiligheid kent geen prijs
De Atmosphère onrusthekkens beschermen de patiënt over 2/3 van de lengte van het bed.	
002	Bedpanelen • Stijlvol en duurzaam
De standaard beugelpanelen zorgen voor een tijdloze look. Optioneel kan er geopteerd worden voor hoge bedpanelen met een volkunststof inzetpaneel (*).	
003	Hulzen • Optimale verzorging (enkel voor 2-delig ligvlak)
Twee hulzen aan het hoofdeinde voor serumhouder, bedgalg of accessoires zorgen ervoor dat het bed optimaal en naar wens uitgerust kan worden.	
004	Bedieningshendel (*) • Centraal en binnen handbereik (enkel voor 2-delig ligvlak)
De bedieningshendel activeert aan beide zijden een gasveer teneinde de rugsteun naar wens te kunnen instellen.	
005	Ligvlak • Comfortabel liggen
Het ligvlak is standaard uitgerust met goed ventilerende metalen ligvlakprofielen.	
006	Wielen (*) • Grote wendbaarheid
Optioneel kan het Aris Hospital bed voorzien worden van wielen Ø 100 mm met individuele rem.	

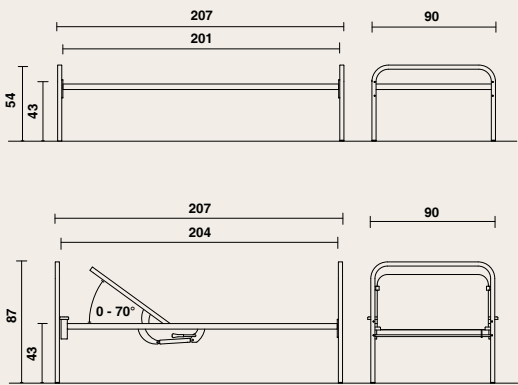


001 Het Aris Hospital bed in de standaard uitvoering met een 1-delig ligvlak en beugelpanelen.

* optie bij Aris Hospital

Aris Hospital Samenvatting

Afmetingen



- lengte: 207 cm, breedte: 90 cm;
- ligvlakhoogte: ± 43 cm;
- gewicht (excl. uitbreidingen): 43 kg;
- ligvlakmaat: 201 x 90 cm (bij standaardversie);
- ligvlakmaat: 204 x 90 cm (bij 2-delig ligvlak);
- matrasmaat: 195 x 90 cm, dikte: 12 à 15 cm.

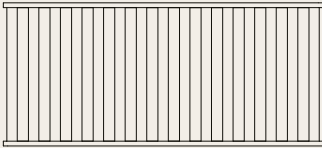
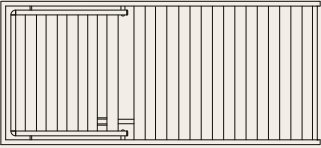
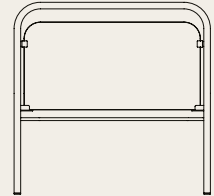
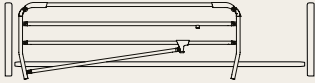
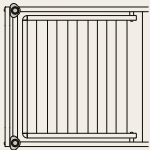
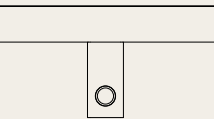


Een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding gaat bij Haelvoet niet ten koste van het milieu, want Haelvoet draagt duurzaamheid – in beide betekenissen van het woord – hoog in het vaandel. Al onze producten hebben een lange levensduur en worden geleverd met 10 jaar garantie op constructiefouten.



Het Aris ziekenhuisbed wordt vervaardigd volgens ISO 9001:2015 en ISO 13485:2016 en is in overeenstemming met de Europese Medische Hulpmiddelen Verordening EU 2017/745 en alle van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen:

- EN 60601-1 Medische elektrische toestellen - Deel 1: Algemene eisen voor veiligheid, met uitzondering van de elektrische bepalingen.
- EN 60601-2-52 Medische elektrische toestellen - Deel 2-52: Bijzondere eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties van medische bedden, met uitzondering van de elektrische bepalingen.
- EN ISO 14971 Toepassing van risicomanagement op medische hulpmiddelen.

	Standaard Aris	Opties Aris
LIGVLAK	 • 1-delig stalen ligvlak	 • 2-delig stalen ligvlak
WIELEN	 • Poten met vloerbeschermers	 • Wielen ø 100 mm, individueel geremd
PANEELTYPE	 • Laag bedpaneel	 • Hoog bedpaneel met volkunststof inzetpaneel
ONRUSTHEKKENS		 • Atmosphère onrusthekkens (enkel in combinatie met hoog bedpaneel)
BEDIENING	 • Bedieningshendel (enkel indien 2-delig ligvlak)	
EXTRA'S	 • 2 bevestigingshulzen aan hoofdeinde (enkel indien 2-delig ligvlak)	 • Bevestigingshulzen voor Atmosphère onrusthekkens

Accessoires

De bijhorende accessoires zijn optimaal afgestemd op de bestaande bedhulzen en accessoirehouders. Bij Haelvoet stellen wij aan de accessoires dezelfde strenge kwaliteitseisen als aan onze ziekenhuisbedden, zodat u altijd de zekerheid hebt daadwerkelijk met een kwalitatief hoogstaand product te werken.

001	Bedgalg	 De bedgalg bestaat uit een geplooidedikwandigestalenbuis. De bedgalg is voorzien van een handgreep met lint: manueel aanpasbaar of optioneel met automatisch oprolsysteem.	007	Opstahulp (*)	 De opstahulp biedt de patiënt een optimale steun bij het uit- en instappen. De vormgeving maakt een ergonomische uit- en instapbeweging mogelijk.
002	Serumhouder voor bedgalg	 De serumhouder voor de bedgalg heeft 4 haken en is eenvoudig op de bedgalg te plaatsen.	008	Urinefleshouder (*)	 De urinefleshouder wordt gemonteerd in de 2 kunststof accessoirehaken die standaard aanwezig zijn op het bed. Er kan gekozen worden uit 2 modellen.
003	Naamkaarthouder (*)	 De naamkaarthouder kan op het bedpaneel geplaatst worden. Op deze eenvoudige wijze kan het bed voorzien worden van een eenduidige identificatie.	009	Bedpanhouder (*)	 De bedpanhouder wordt eenvoudig opgehangen aan het bedpaneel.
004	Accessoirebeugel (*)	 De accessoirebeugel kan gebruikt worden wanneer klantspecifieke wensen zich opdringen. De beugel met 4 haken is 310 mm lang en wordt geplaatst in de accessoirehaken.	010	Zuurstoffleshouder	 De zuurstoffleshouder bestaat uit een stevige arm met een mand uit massieve staaldraad. Het geheel is afgewerkt met een chroomlaag.
005	Bokaalhouder (*)	 De bokaalhouder is voorzien voor het plaatsen van twee bokaalen. De houder wordt geplaatst in de standaard accessoirehaken.	011	Demonteerbare voetensteunverlenging (*)	 Om het ligvlak optimaal te gebruiken bij een bedverlenging, kan er gekozen worden om een los voetverlengstuk van 20 cm aan het voeteneind te plaatsen.

* enkel mogelijk bij Siena Hospital