

Lago Care

16233 La sécurité et le confort vont de pair pour le lit Lago Care. Une position basse du lit de ± 25 cm limite le risque de chute et une hauteur de travail ergonomique de ± 80 cm garantit un soin efficace.

Chariot

- Réglage de la hauteur variable extrêmement stable au moyen d'un système à bras porteurs.
- Réglage Trendelenburg et anti-Trendelenburg jusqu'à $\pm 16^\circ$.
- Roulettes dissimulées Ø 50 mm avec capots en matière synthétique, freinage 2 par 2.
- Pédale design pour l'activation du système de freinage.
- Le chariot ouvert facilite l'accès pour le nettoyage.
- Possibilité d'utiliser un soulève-malade.
- Le lit peut être déplacé dans chaque position, sauf dans la position de sécurité (= la position la plus basse).

Sommier

- Sommier en trois ou quatre(*) parties.
- Dossier réglable électriquement jusqu'à $\pm 70^\circ$ avec autorégression.
- Réglage du dossier avec arrêt intermédiaire à une inclinaison de 30° (si équipé d'un débrayage)
- Plicature-genoux réglable électriquement jusqu'à $\pm 34^\circ$ (si 4 plans).
- Repose-pieds réglable manuellement pour position Fowler (si 4 plans).
- Repose-jambes réglable manuellement jusqu'à $\pm 14^\circ$ (si 3 plans).
- Manipulations électriques des parties du sommier pourvues d'un système anti-coincement.
- Sommier fait de lattes profilées arrondies, en acier.
- En standard pourvu pour mettre des ceintures de contention.
- Relève-buste et repose-jambes pourvus de 2 retenues de matelas en matière synthétique.
- Rallonge de lit télescopique jusqu'à 20 cm (pas possible avec les galeries Pollux).
- 2 coins du lit, à la tête du lit, équipés de douilles, pour porte-sérum ou potence de lit.
- Absence de boulons de fixation visibles pour le panneau pieds.
- Panneaux de lit en hêtre massif (*).
- Coins du lit arrondis pour l'augmentation de la sécurité passive.

Manipulations électriques du lit

- Les fonctions électriques du lit peuvent être activées par une télécommande.
- La télécommande est pourvue d'une fonction sommeil programmée.
- La télécommande peut se verrouiller grâce à une combinaison de touches.
- La télécommande à blocage sélectif (*) permet de désactiver indépendamment différentes fonctions à l'aide d'une clé magnétique.

Panneaux

- Midea (standard)
- Valentino (*)
- Puro (*)
- Felina (*)
- Neo (*) / Lusso (*)

Galeries de protection Accessoires

- Pollux (*)
- Trix (*)
- Atmosphère (*)
- Twin (*)

Veuillez vous référer à notre liste d'accessoires.

(*) Option




HAELVOET NV | L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM | T +32 (0) 51 48 66 95 | INFO@HAELVOET.BE | WWW.HAELVOET.BE
Vu sa recherche permanente du progrès technologique, Haelvoet se réserve le droit d'apporter des modifications.



Dimensions et prestations

- Largeur : 100,5 cm, Longueur : 208 cm
- Variation de la hauteur du sommier : ± 25 cm - ± 80 cm
- Espace libre chariot : 137 mm (hauteur sommier 42 cm)
- Charge dynamique sécuritaire : 250 kg
- Poids (hors extensions) : 140 kg
- Dimensions du sommier : 204 x 86 cm
- Taille du matelas : 195 x 85 cm, épaisseur : 12 à 15 cm
- Consommation en veille: 0,5 W (max. 4,38 kWh/an).

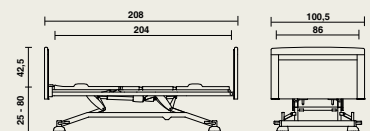

Matériel utilisé et finition

- Bois : Hêtre (massive, contre-plaqué), en aggloméré (mélaminé).
- Mousse: CMHR-mousse (anti-feu).
- Métal: revêtement époxy RAL 9006 alu.
- Charnières en matière synthétique autolubrifiantes.
- Résistant aux produits d'entretien usuels.

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur la **construction** : voir nos fiches matériaux.
Pour les **couleurs** : voir notre large gamme.

Options

- Sommier en acier, 4 parties.
- Sommier avec panneaux amovibles en stratifié massif.
- Rallonge du repose-pieds jusqu'à 20 cm.
- Butoirs (pas possible avec le panneau Midea).
- Protection murale.
- Galeries de protection.
- Télécommande éclairée.
- Télécommande à blocage sélectif (Trendelenburg incl.)
- Boîtier de contrôle Bluetooth.
- Télécommande sans fil (avec boîtier de contrôle Bluetooth) (si sommier en 4 parties)
- Lampe de lecture.
- Batterie.
- Roues Ø 100 mm, Ø 125 mm ou Ø 150 mm, freinage central à l'aide d'une barre de frein.
- Ronfleur de frein (seulement avec frein central).
- 5ième roue (seulement avec roues Ø 150 mm).
- Débrayage mécanique (CPR).
- Sommier avec largeur: 90 cm, 100 cm ou 110 cm.
- Support pour bouteille d'oxygène (Ø 147mm, H 222 mm).