



ZENSO

gamme de fauteuils relax

CONTENU

Collection ZenSo

La collection ZenSo est polyvalente, fonctionnelle et offre une solution d'assise adaptée à chaque environnement.

L'HISTOIRE <i>Et si... tout était possible ?</i>	03
ZENSO E-LIFT <i>Assistance électrique au redressement</i>	04
ZENSO E-MOVE <i>Réglages électriques</i>	06
ZENSO ERGO-LINE / DUO-LINE <i>Réglages manuels</i>	08
SE LEVER ET S'ASSEOIR <i>Mécanisme E-lift</i> <i>Fonction « Raising & sitting assist »</i>	10
MAKE IT YOURS <i>Configurez votre fauteuil</i>	12
ACCESSOIRES <i>Aperçu</i>	16
PORTE-SÉRUMS ET DOUILLES <i>Large choix</i>	17
ZENSO EN PRATIQUE	18



Haelvoet
Edition 2026
Haelvoet se réserve le droit d'apporter des modifications.
De petites différences de couleur sont possibles.

L'histoire

Et si... tout était possible ? ZenSo propose la gamme de fauteuils de soins **la plus complète** du marché.

LARGE ÉVENTAIL

Le développement de la collection ZenSo vise à offrir la gamme de fauteuils de soins la plus complète du marché. Grâce à un mélange parfait de fonctionnalités et d'innovation, nous pouvons répondre à tous vos besoins.



PHILOSOPHIE DE CONCEPTION

Et si... tout était possible sur tous les fauteuils ? Grâce à notre structure de production interne, nous pouvons répondre rapidement à diverses questions et souhaits. Nous sommes, par exemple, très fiers que le fauteuil ZenSo soit disponible avec **différents systèmes relax, manuels et électriques**, avec ou sans aide au redressement. De plus, un large choix de roues et d'options de finition pour les accoudoirs permettent de personnaliser le fauteuil selon votre goût.

FONCTIONNALITÉ & DURABILITÉ

La mobilisation des patients est d'une importance fondamentale, c'est pourquoi Haelvoet a intégré des **systèmes de redressement ingénieux** dans sa gamme ZenSo. Le « raising & sitting assist » facilite le lever et l'assise grâce au soutien offert par l'assise releveuse. De plus, il y a aussi le mécanisme innovant appelé E-lift. En activant l'assistance au redressement, le système de freinage automatique est déclenché : une situation sûre pour passer d'une position assise à une position debout ou vice versa.



Haelvoet aspire à une **économie circulaire** et développe tous les produits de manière modulaire. Cela facilite le remplacement des pièces et augmente la durée de vie du produit. De plus, la modularité garantit que le produit peut évoluer avec les souhaits et les besoins de l'utilisateur.

ESTHÉTIQUE

Le fauteuil ZenSo allie l'ergonomie à l'esthétique et peut prendre plusieurs formes. Grâce au large choix d'accoudoirs, de roues et de finitions, le fauteuil ZenSo s'adapte **aussi bien à un environnement domestique qu'aux divers environnements de soins**. Ensemble nous augmentons l'autonomie de l'utilisateur tout en donnant au personnel soignant la possibilité de se concentrer sur les soins.

*La collection ZenSo est à la croisée de deux mondes :
when innovation meets design.*





ACCOUDOIRS ABAISSABLES
Facilitent les transferts

FREIN CENTRAL
Activation en 1 mouvement

ZENSO E-LIFT

Réf. 19108

Il est important de récupérer le plus rapidement possible après une intervention chirurgicale. La récupération s'accélère par une autonomie accrue. Le ZenSo E-lift est une aide idéale pour les personnes à mobilité (temporairement) réduite. En fournissant une assistance électrique, le fauteuil aide l'utilisateur à s'asseoir ou à se lever de façon autonome.



 Scannez et découvrez comment le ZenSo E-lift facilite un transfert

E-LIFT
Fonctionnalité maximale

- + Assistance au redressement complet du patient et freinage automatique
- + Electrique et tactile
- + Télécommande filaire ou intégrée
- + Prise magnétique réduit le risque de trébucher
- + Utilisable sans alimentation grâce à la batterie Li-ion (*)

(*) : Option



MATIÈRE SYNTHÉTIQUE
Facile à entretenir

LOOK CHALEUREUX
*Accoudoirs revêtus et
télécommande intégrée*

ZENSO E-MOVE

Réf. 20052

Les patients ainsi que le personnel soignant doivent se sentir bien dans leur environnement. Un fauteuil peut jouer un rôle important à cet égard. Le fauteuil ZenSo E-move combine une apparence chaleureuse avec des caractéristiques qui augmentent l'autonomie de l'utilisateur et garantissent en même temps une grande facilité d'utilisation.

E-MOVE

Confort et tranquillité

- + Electrique et tactile
- + Large choix de roues
- + Télécommande filaire ou intégrée
- + Prise magnétique réduit le risque de trébucher
- + Utilisable sans alimentation grâce à la batterie Li-ion (*)

(*) : Option



Connexion magnétique



LOOK CHALEUREUX
Accoudoirs revêtus

BASE AJOURÉE
Entretien facile

ZENSO ERGO-LINE

Réf. 19107

Un fauteuil doit être accessible et intuitif à utiliser. Le mécanisme relax Ergo-line incline simultanément le dossier et le repose-jambes et est facile à utiliser au moyen d'un poignée ergonomique.



Mouvement synchrone

- + Le dossier et le repose-jambes s'inclinent de manière synchrone
- + Raising & sitting assist (*)
- + Facile à utiliser avec une poignée ergonomique

ZENSO DUO-LINE

Réf. 20107

Le mécanisme Duo-line permet de régler le repose-jambes séparément du dossier lorsque vous lisez ou regardez la télévision par exemple.



Mouvement individuel

- + Le dossier et le repose-jambes se règlent séparément.
- + Raising & sitting assist (*)
- + Facile à utiliser avec deux poignées ergonomiques.

(*) : Option

1. MÉCANISME E-LIFT

L'assistance au redressement soutient l'utilisateur de façon optimale. Le fauteuil freine automatiquement grâce au système de freinage SafeBrake.



SYSTÈME DE FREINAGE AUTOMATIQUE

En activant l'assistance au redressement, le **système de freinage automatique** SafeBrake est déclenché : il freine automatiquement les 4 roues




TÉLÉCOMMANDE FILAIRE OU INTÉGRÉE

Choix entre une **télécommande avec câble spiralé** ou un **panneau intégré** (uniquement avec côtés revêtus).



2. RAISING & SITTING ASSIST

Le soutien offert par la fonction « raising & sitting assist » permet de se lever et de s'asseoir plus facilement.

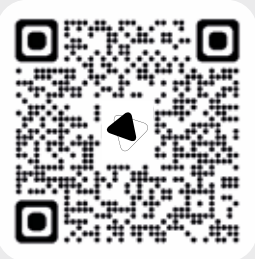

Scannez et découvrez le raising & sitting assist sur ZenSo Ergo-line

RAISING & SITTING ASSIST

Les fauteuils ZenSo Ergo-line et Duo-line peuvent être équipés en option de la fonction **raising & sitting assist** qui peut être facilement activée avec un levier supplémentaire. Le soutien offert par l'assise releveur permet de se lever et de s'asseoir de façon ergonomique.



	ZENSO E-LIFT	ZENSO E-MOVE	ZENSO ERGO-LINE	ZENSO DUO-LINE	ZENSO FAUTEUIL DE REPOS
AIDE POUR SE RELEVER					
Mécanisme E-lift	●	×	×	×	×
Raising & sitting assist	×	×	○	○	×

● : Standard ○ : Possible × : Pas possible



MAKE IT YOURS

*Configurez le fauteuil
entièrement à votre goût*

Le large choix de mécanismes relax, de bases, de roues et d'options de finition vous permet d'adapter complètement le fauteuil à vos souhaits et besoins.

1. MÉCANISME RELAX

Choisissez parmi les différents types de mécanismes de relax.

RELAX	Électrique	 Réglage synchrone et asynchrone	ZENSO E-LIFT
			ZENSO E-MOVE
	Manuel	 Réglage asynchrone	ZENSO DUO-LINE avec raising & sitting assist
			ZENSO DUO-LINE
		 Réglage synchrone	ZENSO ERGO-LINE avec raising & sitting assist
			ZENSO ERGO-LINE
FAUTEUIL DE REPOS	Fixe		ZENSO FAUTEUIL DE REPOS

2. BASE

Après avoir choisi le mécanisme relax, différentes bases avec ou sans roues sont possibles.

		ZENSO E-LIFT	ZENSO E-MOVE	ZENSO ERGO-LINE	ZENSO DUO-LINE	ZENSO FAUTEUIL DE REPOS
BASE						
	Pied bas	○	○	○	○	○
	Pied bas avec roues Ø 65 mm, frein individuel	×	○	○	○	○
	Pied haut	○	○	○	○	○
	Pied haut avec roues Ø 65 mm, frein individuel	×	○	○	○	○
	Roues Ø 100 mm, frein individuel avec repose-pieds	×	○	○	○	×
	Roues Ø 100 mm, frein central sur les 2 roues à l'avant, frein individuel à l'arrière, avec repose-pieds	×	○	○	○	×
	Roues Ø 100 mm, frein central sur les 4 roues, avec repose-pieds	○	○	○	○	×

○ : Possible × : Pas possible


3. ACCOUDOIRS



ACCOUDOIRS ABAISSABLES

Facilitent les transferts

Les accoudoirs abaissables (*) sont disponibles avec une finition en **matière synthétique** ou en **bois**. Les accoudoirs sont réglables en hauteur (3 positions).

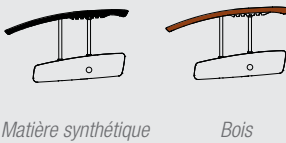

Matière synthétique

Bois



ACCOUDOIRS FIXES REVÊTUS

Look chaleureux

Les accoudoirs revêtus sont disponibles **sans complément**, avec **complément en matière synthétique** ou avec **complément en bois**.



Sans complément

Matière synthétique

Bois

(*) : Pas possible sur le fauteuil de repos ZenSo

4. HAUTEUR ET PROFONDEUR D'ASSISE



Hauteur d'assise*	Profondeur d'assise	Adapté pour une taille physique
42,5 cm**	46 cm	< 164 cm
45 cm	46 cm	164 - 176 cm
45 cm	50 cm***	
47,5 cm	50 cm***	> 176 cm

(*) : Hauteur d'assise mesurée à partir du repose-pieds (si présent)

(*) : Pas possible sur ZenSo E-lift

(**) : Pas possible sur fauteuil de repos ZenSo

Accessoires

Divers accessoires viennent compléter le fauteuil ZenSo.



Tête amovible



Provision coussin nuque



Coussin nuque



Support de fixation



Support pour tablette repas



Tablette repas Elice



Accoudoirs inclinés larges et pivotants



Accoudoirs larges et pivotants



Rail DIN



Accoudoir pour transfusion sanguine



Tablette latérale



Crochets pour accessoires



Unité de lavage



Réducteur anatomique



Assise viscoélastique



Porte-bouteille d'oxygène

Porte-sérums et douilles

Il existe différentes options pour chaque type de chariot.



Porte-sérum Ø 19 mm



Porte-sérum Ø 32 mm

	19 MM	32 MM
Douilles pour porte-sérum selon type de roues		
Sans roues	×	×
Ø 65 mm	×	×
Ø 100 mm, frein individuel	●	×
Ø 100 mm, frein central à l'avant	●	○
Ø 100 mm, frein central sur 4 roues	●	○

● : Standard ○ : Option × : Pas possible

ZENSO

en pratique

REPOSE-JAMBES TÉLESCOPIQUE

Lorsqu'il est incliné, le **repose-jambes s'étend de 70 mm**. Cette fonction assure un soutien optimal des jambes et élimine les plis dans le similicuir au niveau des genoux, qui peuvent être à l'origine des escarres.



ASSISE ET REPOSE-JAMBES COMPLÈTEMENT AMOVIBLES

L'assise et le repose-jambes sont amovibles **en une seule pièce** afin de pouvoir nettoyer en profondeur le fauteuil. Le dessous de l'assise et du repose-jambes est entièrement revêtu en similicuir.

Une assise standard peut donc être remplacée très rapidement par une assise / repose-jambes anti-escarres avec mousse viscoélastique (*).

FREIN ET FIXATION DE DIRECTION SUR LES ROUES AVANT

Un frein et une fixation de direction sur les roues avant d'un fauteuil de soins offrent une stabilité accrue, des manœuvres plus fluides et une réduction de la charge physique. Idéal lors des transferts et dans les espaces restreints : sécurité pour l'utilisateur, confort pour le soignant.



MOUSSE ET REVÊTEMENT IGNIFUGÉS

La mousse de qualité des produits Haelvoet est **toujours ignifuge jusqu'au cœur**, tout comme notre vaste collection de similicuir.




Classe de feu minimale : M2 (NFP 92.503) ou BS5852 + CRIB 5. Mousse et revêtement répondent aux normes EN1021-1 et EN1022-2. Choisir Haelvoet, c'est choisir un produit sûr.

Si vous le souhaitez, des solutions personnalisées sont possibles pour adapter le fauteuil ZenSo parfaitement à votre environnement de soins.


ENTRETIEN FACILE SANS DÉPLACEMENT

Même avec le fauteuil ZenSo sans roues avec un pied haut, le personnel d'entretien peut facilement nettoyer sous la base grâce à une **hauteur libre de 13 cm**.

La conception bien pensée et les surfaces lisses rendent la gamme de fauteuils ZenSo très facile à nettoyer.

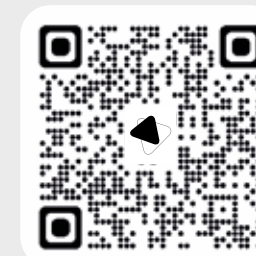

Scannez et regardez le transfert d'une chaise au **ZenSo E-lift**

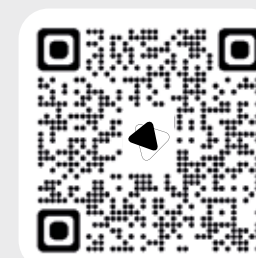

Scannez et regardez le transfert du **ZenSo E-lift** au lit



Un excellent rapport qualité-prix ne porte pas préjudice à l'environnement, car Haelvoet accorde une grande importance à la durabilité, aux deux sens du terme. Tous nos produits ont une longue durée de vie et sont délivrés avec une garantie de 15 ans sur les vices de construction.

Les fauteuils ZenSo sont fabriqués selon la norme ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016 et sont conformes aux Exigences essentielles de santé et de sécurité et à toutes les normes européennes harmonisées qui sont d'application :

EN 16139 : 2013 Meubles - résistance, durabilité et sécurité - Exigences pour les sièges à usage non domestique.

EN 1728 : 2012 Ameublement - Sièges - Méthodes d'essais pour la détermination de la résistance et la durabilité - Mobilier domestique.


EN 1022 : 2005 Mobilier domestique - Sièges - Détermination de la stabilité.



Grâce à nos processus de production modernes et écologiques, une utilisation maximale de matériaux recyclables et notre certificat PEFC, opter pour Haelvoet, c'est opter pour un produit correct.



(*) : Option

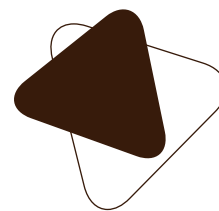

Haelvoet nv | **Belgique**
Leon Bekaertstraat 8
B-8770 Ingelmunster
T +32 (0) 51 48 66 95

info@haelvoet.be
www.haelvoet.be

Haelvoet bv | **Pays-Bas**
Schimminck 1
5301 KR Zaltbommel
T +31 (0) 88 599 05 99
F +31 (0) 88 599 05 00
info@haelvoet.nl
www.haelvoet.nl

Haelvoet sarl | **France**
130, Boulevard de la Liberté
59000 Lille
T +33 (0) 3 20 02 71 71
F +33 (0) 3 20 88 18 91
info@haelvoet.fr
www.haelvoet.fr

Haelvoet sa | **Suisse**
Route de la Plaine 45
1580 Avenches
T +41 (0) 26 675 46 86
F +41 (0) 21 560 46 46
info@haelvoet.ch
www.haelvoet.ch

Haelvoet srl | **Roumanie**
Parcul Industrial Jibou 1
455200 Jibou, Salaj
T +40 (0) 260 64 22 33
F +40 (0) 260 64 22 55
info@haelvoet.ro
www.haelvoet.ro